

ROHO®

Hybrid Select- Sitzkissen

Herausragende Positionierung
mit bewährtem Hautschutz.



permobil

Hochmoderne Hybridsitzkissen mit herausragender Positionierung

Die Druckpunkte im Bereich der Sitzbeinhöcker passen sich beim Hybrid Select an Ihre individuelle Form, Ihr Gewicht und an jegliche Änderung Ihrer Position an. Die ROHO-Auflage und der IT-Lufteinsatz im Bereich der Sitzbeinhöcker nutzen die ISOFLO® Memory Control, mit dem Sie jederzeit die richtige Position finden und einstellen können.



3-Zonen ISOFLO Memory Control für anpassbare Positionierung

Merkmale guter Sitzlösungen

Mechanische Prüfung



Hautschutz

Die Einsinkprüfung (ISO 16840-2) zeigt, wie tief der Körper in das Kissen sinkt.

Die Umhüllungsprüfung (ISO 16840-12) zeigt, wie das Körpergewicht durch Umhüllung oder Entlastung vom Kissen getragen wird.

Die Scherkraftprüfung (Scherkraftsensor) zeigt das Potenzial der Kisseninteraktion mit dem Körper, das Gewebe zu formen oder zu verschieben.

Die Kontaktfläche (Druckkartierung) zeigt, wie viel Kontakt zwischen der Sitzoberfläche und der Person besteht.




Positionierung

Die Rutschfestigkeitsprüfung (ISO 16840-2) zeigt, wie viel Kraft erforderlich ist, um im Sitzen auf dem Kissen nach vorne zu gleiten.



Stabilität

Die Seitenstabilitätsprüfung (ISO 16840-13) zeigt die Stabilität, die das Kissen bietet, wenn der Nutzer sich zur Seite lehnt.

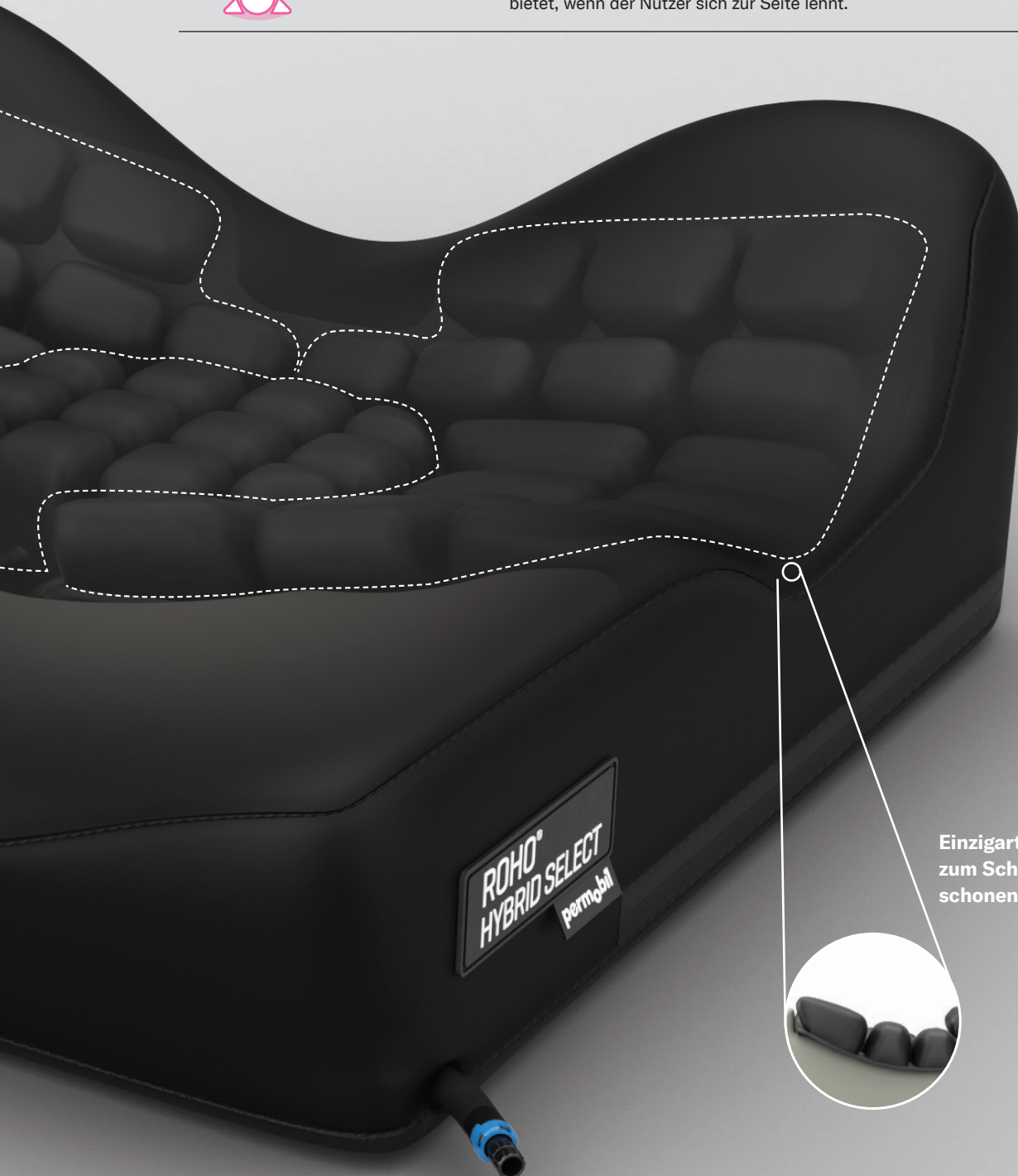

Einzigartige ROHO Luftzellen zum Schutz der Haut und schonenden Einsinken

Beckenmulde mit patentierter ROHO® DRY FLOATATION®-Technologie zur Lastverteilung und für 3,2 cm tiefes Einsinken.

Profilierte
Schaumstoff-Beinmulden

Einzigartige Seitenstabilität


Das innovative Design des Hybrid Select nutzt die Positionierungsfähigkeit eines vorgeformten Schaumstoffkissens aus extrem widerstandsfähigem Schaumstoff (HR) mit Beinmulden, um Ihnen Halt, seitliche Stabilität und eine Entlastung des Steißbeins zu bieten.

Aussparung zur Entlastung
des Steißbeins




Bewährter Hautschutz

Mit dem Hybrid Select erfahren Sie funktionelle Stabilität in Kombination mit hervorragendem Schutz der Haut und des Gewebes. Die Form des Hybrid Select ermöglicht das Einsinken des Beckens in Luftzellen, die sich dem Körper und seinen Bewegungen anpasst. Damit schützt es Haut und Gewebe.

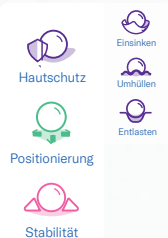

Optionale Entlastung serienmäßig

Das Hybrid Select bietet mehr Flexibilität und Entlastung als andere Dekubituskissen. Durch die flexible Einstellung erleichtert es immer wieder, die ideale Positionierung zu finden. Das Hybrid Select bietet eine weitere exklusive Entlastungslösung, indem der Lufteinsatz für die Sitzbeinhöcker (IT) entfernt wird.

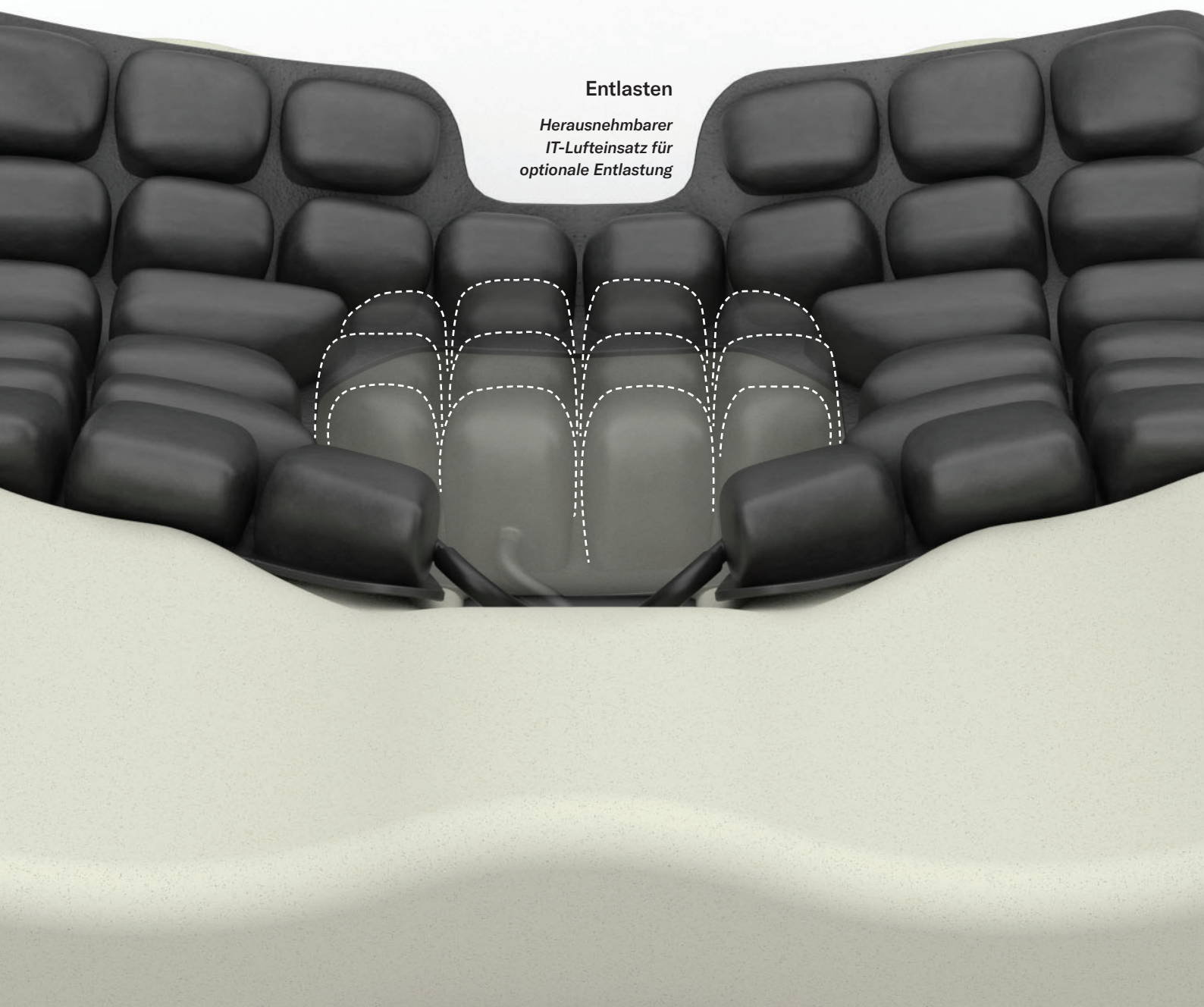

Entlasten
*Herausnehmbarer
IT-Lufteinsatz für
optionale Entlastung*



Das Hybrid Select
bietet mir die Positionierung,
die ich brauche und erleichtert
mir den Transfer.

— Eric
Permobil-Nutzer

Technische Daten Hybrid Select

Bezug	Stretch-Air®
Produktgewicht	1,45 kg*
Max. Benutzergewicht	227 kg
Garantie auf das Kissen	36 Monate beschränkt
Garantie auf den Bezug	6 Monate beschränkt


Ihr Fachhändler:



Größen

35,5 cm x 37,5 cm	40,5 cm x 42,5 cm	43,0 cm x 47,5 cm	51,0 cm x 42,5 cm
35,5 cm x 42,5 cm	40,5 cm x 45,0 cm	43,0 cm x 52,5 cm	51,0 cm x 45,0 cm
38,0 cm x 40,0 cm	40,5 cm x 47,5 cm	45,5 cm x 42,5 cm	51,0 cm x 47,5 cm
38,0 cm x 42,5 cm	40,5 cm x 52,5 cm	45,5 cm x 45,0 cm	51,0 cm x 52,5 cm
38,0 cm x 45,0 cm	43,0 cm x 42,5 cm	45,5 cm x 47,5 cm	
40,5 cm x 40,0 cm	43,0 cm x 45,0 cm	45,5 cm x 52,5 cm	

*Das Produktgewicht basiert auf einer Kissengröße 40,5 x 40,5 cm. Das Produktgewicht variiert je nach Kissenmaß. Die Angaben sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.

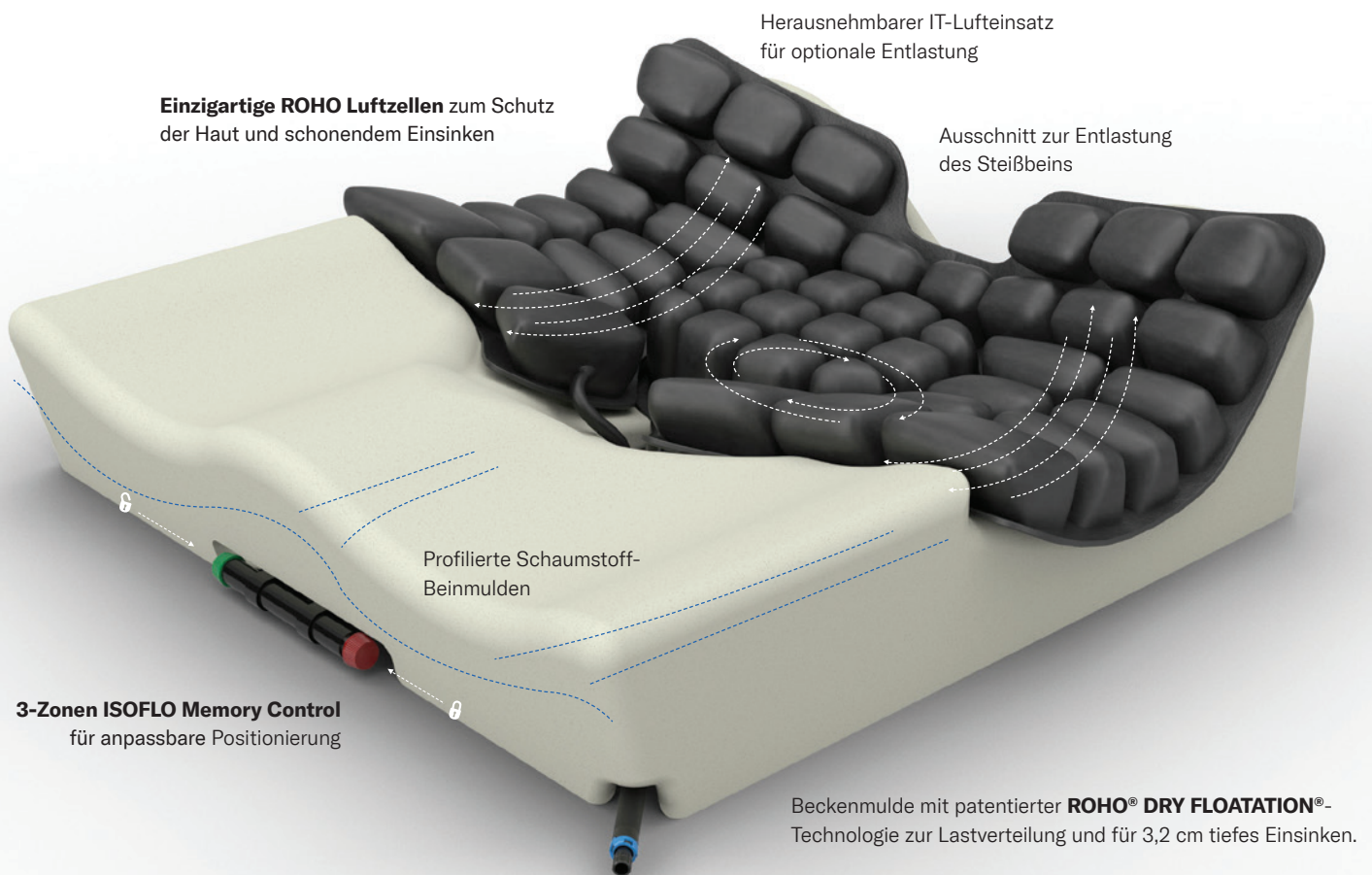

Hybrid Select
Vorderansicht



Hybrid Select
Ansicht von links



Hybrid Select
Rückansicht

